

β-GLYCEROFOSFÁT DISODNÝ PENTAHYDRÁT

inhibitor fosfatázy

Jednoduchý donor organických fosfátů a substrát pro fosfatázu. Vhodný jako aditivum pro buněčné kultury, média a lýzové pufrы.


CAS: 13408-09-8**Vzorec:** $C_3H_7Na_2O_6P \cdot 5H_2O$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 306,12

Zásobní roztok: 1 M (306 mg/ml) v H_2O , po filtraci (0.2 μm) rozdělte do 1 ml reakčních vialek

Stálost roztoku: při -20 °C

Pracovní koncentrace: 10-50 nM

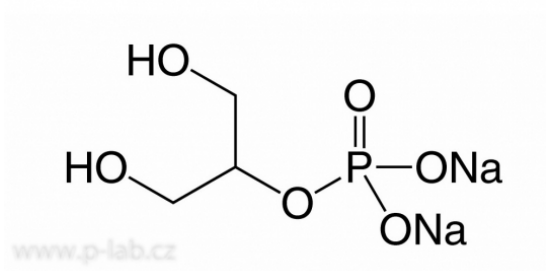

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, pro biochemii	50 g	R.6847.1
min 97 %, pro biochemii	100 g	R.6847.2
min 97 %, pro biochemii	250 g	R.6847.3
min 97 %, pro biochemii	500 g	R.6847.4