


FatstGene® Block & Go | NIPPON Genetics

Roztok 2v1 pro blokaci a zesílení signálu při Western blottingu

- Roztok zajišťující blokování a hybridizaci primární a sekundární protilátky v jednom kroku
- Navíc zvyšuje signál vyvinutý pomocí HRP (křenová peroxidáza) nebo AP (alkalická fosfatáza)
- Výrazně šetří Váš čas - až o 2,5 hodiny kratší doba práce ve srovnání s konvenčním protokolem používajícím sušené mléko nebo BSA
- Zvýšená citlivost detekce - umožňuje detekovat proteiny od 0,5 µg lyzátu
- Roztok neobsahuje proteiny, tudíž je sníženo celkové pozadí a minimalizován výskyt nespecifických signálů
- Flexibilní použití v jednokrokových nebo dvoukrokových protokolech
- Kompatibilní s PVDF a NC membránami
- Bez ohledu na velikost pórů membrány roztok minimalizuje pozadí způsobené nespecifickou vazbou protilátek na bílkoviny

Technické parametry

Skladování: maximálně 1 rok při teplotě 25 °C

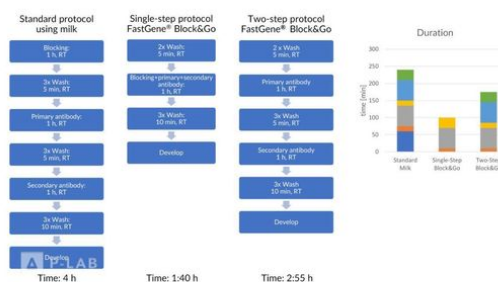

Popis	Balení (ml)	Katalogové číslo
FastGene Block & Go	500	N050100