


Tankové blotování

Elektroblotovací jednotky pro blotování až 4 gelů současně

- Pro přenos proteinů a nukleových kyselin z gelů na vhodnou blotovací membránu
- Barevně označené kazety a asymetrické víko zajišťují správné nastavení blotů a směr blotování
- Konstrukce kazety pro maximální přenos proudu a blotovací kontakt
- Krátká vzdálenost mezi elektrodami zaručuje rovnoměrně vysokou stálost proudu v oblasti blotování a snižuje množství vytěženého tepla
- Ideální pro dlouhé a na teplo citlivé proteiny
- Blotovací moduly jsou kompatibilní s vertikálními elektroforetickými jednotkami PROclamp

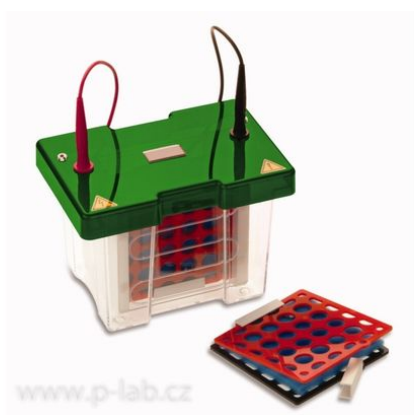

Tankový blotovací systém MINI PROclamp Rotiphorese®


- Možnost paralelně blotovat 4 gely o rozměrech maximálně 10 x 10 cm
- Kompatibilní s vertikální elektroforetickou jednotkou Rotiphorese® PROclamp MINI

Technické parametry

Celkový objem pufru:	1,5 l
Vzdálenost mezi elektrodami:	6 cm
Maximální napětí :	200 V
Maximální proud :	1000 mA
Rozměry (š x h x v):	13 x 20 x 13.5 cm

Popis	Katalogové číslo
PROclamp Rotiphorese® MINI tank	R.3513.1
Blotovací modul MINI PROclamp	R.3517.1
Protiskluzová kazeta PROclamp MINI (bez podložky)	R.3518.1
Blotovací podložky PROclamp MINI (4 páry)	R.3519.1

Součástí balení je 1x Rotiphorese® PROclamp MINI tank, bezpečnostní víko s kabely a 1x blotovací modul PROclamp MINI pro max. 4 gely, vč. 4 kazety a 4 páry vláknitých podložek

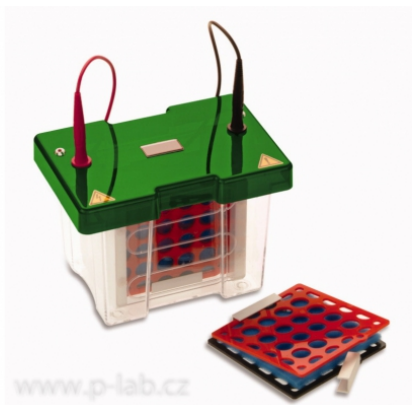

Tankový blotovací systém MINI PROclamp Rotiphorese®

Tankový blotovací systém MAXI PROclamp Rotiphorese®


- Možnost paralelně blotovat 4 gely o rozměrech maximálně 20 x 20 cm
- Chladicí spirála pro ochlazování pufru
- Kompatibilní s vertikální elektroforetickou jednotkou Rotiphorese® PROclamp MAXI

Technické parametry

Celkový objem pufru:	6,4 l
Vzdálenost mezi elektrodami:	6 cm
Maximální napětí :	350 V
Maximální proud :	2000 mA
Rozměry (š x h x v):	30 x 18 x 27 cm

Popis	Katalogové číslo
MAXI PROclamp Rotiphorese®	R.5814.1
Blotovací modul MAXI PROclamp	R.5816.1
Protiskluzová kazeta PROclamp MAXI (bez podložky)	R.5827.1
Blotovací podložky PROclamp MAXI (6 ks)	R.5829.1

Součástí balení je 1x Rotiphorese® PROclamp MAXI tank, bezpečnostní víko s kabely, vyjímatelná chladicí cívka, 1x blotovací modul PROclamp MAXI pro max. 4 gely, vč. 4 kazety a 18 párů vláknitých podložek

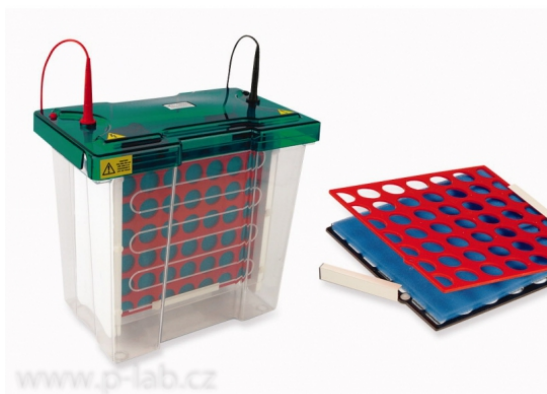

Tankový blotovací systém MAXI PROclamp Rotiphorese®